

Para Tratamiento Facial y Corporal

Efecto regenerativo
y tensor.

Dr K


Regen Lift

 **MINI THREADS**

- ❧ Método **Regenerante y Revitalizante**, basado en el implante de mini hilos de polidioxanona, creando una red vectorial que actúa como soporte de los tejidos a la vez que **estimula la producción de colágeno y elastina**.
- ❧ La presencia de los minihilos acelera la microcirculación en la zona tratada. Esto provoca la **regeneración de las células y un aumento en la síntesis del colágeno** de forma prolongada.
- ❧ **Activa la circulación**, provocando una mayor oxigenación y aportando mayor luminosidad a la piel.
- ❧ El resultado es una **piel rejuvenecida, más vital y luminosa, más flexible y lisa**.

- ❧ **Mejora** el aspecto de las **pequeñas arrugas, los pliegues nasogenianos y la piel flácida**.
- ❧ La aplicación de **hilos espiculados** provoca un efecto **lifting** inmediato. El rostro se define y recupera su perfil sin modificar los rasgos del paciente.
- ❧ Se aplica mediante **técnica ambulatoria**, solo necesita anestesia tópica local. Sin hospitalización.
- ❧ El paciente **no necesita un tiempo de recuperación**, pudiendo reincorporarse a su vida cotidiana de forma inmediata e incluso maquillarse.
- ❧ Su aplicación es rápida(15-30 minutos), segura y prácticamente **indolora**.

Fabricados con Polidioxanona (PDO), material altamente seguro aplicado en técnicas de cirugía cardíaca, que actúa favoreciendo la cohesión de las células.

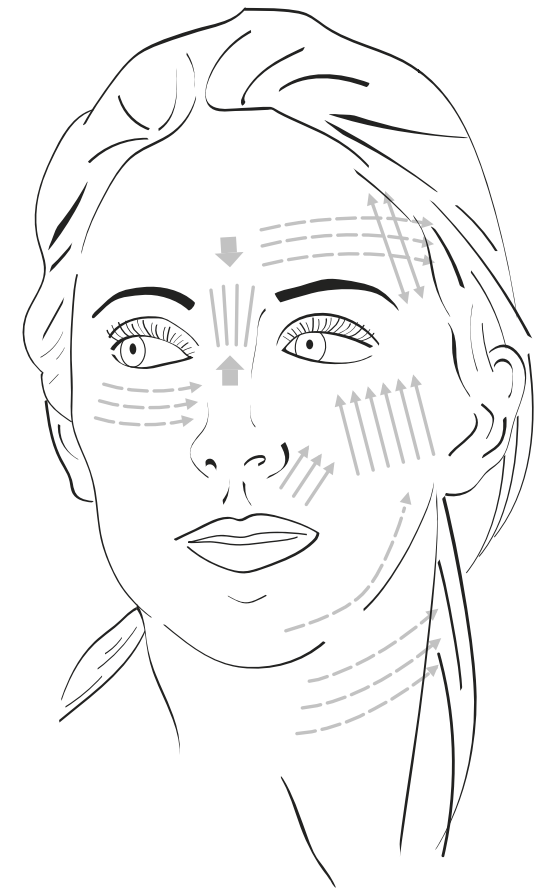

MONO FILAMENTO

- Se presentan en cajas de 100 unidades.



Referencia	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo (USP)	Recomendaciones
31G30mm	31G	30mm	30mm	7-0	Facial. Hilo muy delgado y corto. Para zonas de aplicación pequeñas con pieles muy finas.
31G40mm	31G	40mm	60mm	7-0	Facial. También es un hilo muy delgado, pero largo, apropiado para cuello, patas de gallo y en general para zonas de piel muy fina
29G40mm	29G	40mm	50mm	6-0	Facial. Zona de mejilla, frente, cuello, contorno de ojos, cuello....
29G50mm	29G	50mm	70mm	6-0	Facial. Mejilla, zona mandibular, cuello...
27G30mm	27G	30mm	30mm	5-0	Facial. Hilo corto pero grueso. Ideal para generar volumen y minimizar arrugas y pliegues.
27G50mm	27G	50mm	70mm	5-0	Facial. Más grueso que el 29g50, crea un canal fibrótico mayor aportando un mayor efecto regenerador.
27G60mm	27G	60mm	90mm	5-0	Facial y corporal. Perfil mandibular, brazos...
25G90mm	25G	90mm	150mm	5-0	Corporal. Un hilo grueso y largo apropiado para tratamientos corporales.



DOUBLE SCREW



- **Doble hilo cargado en espiral**, con diferentes medidas para una mejor adaptación a cada tratamiento.
- Recomendado para obtener una **mayor voluminización** en la zona tratada (relleno de arrugas, volumen en mejillas) y para un mayor efecto regenerador.
- El diseño en espiral de los hilos les da **flexibilidad y elasticidad** lo que permite su utilización en zonas de movimiento facial, sobre todo en pliegues y arrugas gestuales.
- Los hilos delgados y en espiral resultan flexibles y elásticos, lo que les permite acompañar el movimiento natural del pliegue durante la gesticulación. Así evita que puedan resultar apreciados en pieles muy finas o que el paciente pueda tener una sensación de incomodidad o molestia al gesticular.
- La utilización de una aguja más gruesa (26G) favorece **la creación de un canal fibrótico mayor**, favoreciendo la voluminización de la zona, minimizando pliegues y arrugas.
- Se presentan en cajas de 50 unidades. (5 packs x 10u)

Referencia	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo (USP)	Recomendaciones
DS 26G38	26G	38mm	50mm	7-0	Facial.
DS 26G60	26G	60mm	90mm	7-0	Facial y corporal.
DS 26G90	26G	90mm	150mm	7-0	Facial y corporal.

TWIN TWIST



- **Doble hilo entrelazado.**
 - Este diseño favorece un **mayor efecto regenerador** en los tejidos, al tratarse de un hilo doble y crear un **canal fibrótico mayor**.
 - Recomendado **para pieles muy finas** que necesitan ser redensificadas, sin correr el riesgo de que un hilo más grueso (y por tanto menos flexible) pueda ser apreciado en zonas de mucha movilidad como cuello, contorno de ojos, etc.
 - El trenzado de las hebras les permite una mayor **flexibilidad y elasticidad** de la que tendría un hilo normal.
- De esta forma puede acompañar el movimiento natural de la piel al gesticular sin el riesgo de ser apreciado o provocar molestia.
- Se presentan en cajas de 50 unidades. (5 packs x 10u).

Referencia	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo (USP)	Recomendaciones
TT 26G38	26G	38mm	50mm	7-0	Facial.
TT 26G60	26G	60mm	90mm	7-0	Facial.

HILOS ESPICULADOS. ROSE COG Y PULL COG

- Dermica les ofrece la **más completa gama** de hilos espiculados del mercado actual. Los mejores y **más eficaces** diseños de espículas para que ustedes puedan elegir aquellos que mejor se adaptan a las necesidades de cada tratamiento y a las características de cada paciente.
- Pielles muy finas que requieren hilos más delgados. Rostros jóvenes que no necesitan un fuerte efecto tensor. Flacidez acusada en pieles mayores, que sin querer pasar por el quirófano requieren una actuación más dramática.
- Dermica ofrece una propuesta para cada problema. Para que usted pueda elegir y garantizar a su paciente los mejores resultados.

- **Doble** línea de espículas
- Unidireccionales, o **bi-direccionales**.
- Espículas que envuelven el hilo en **360°**
- Espículas **reforzadas**, más gruesas y potentes.
- Distintos **grosos** de hilo, desde 1 a 3-0
- Con o sin sistema de **tracción** "pulling"
- Con o sin salida distal.
- Aguja de 23G, 20G y 19G
- Aguja de **punta roma** 20g y 19g

ROSE COG




PULL COG



3D COG



PULL HEART

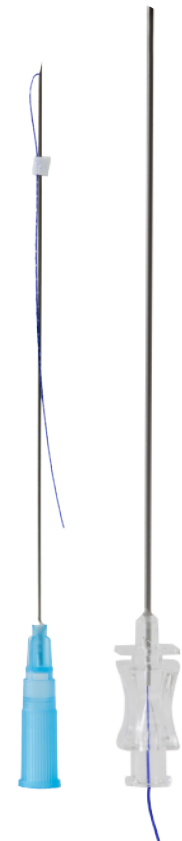

ROSE COG - Bi-way



- Hilo con **doble línea de espículas** que aportan una mayor fijación.
- Al retirar la aguja, el hilo queda plegado lo que hace que las espículas se posicionen en sentido **bi-direccional**, quedando sujetas al tejido.
- Especialmente indicado para un **mayor efecto de fijación** del tejido en zonas entre ligamentos. Muy apropiado para **redefinir el perfil mandibular** (usado en sustitución de los hilos mono habituales en esta zona o como refuerzo de los mismos).
- **Diferentes medidas** disponibles para una mayor adecuación a las distintas areas a tratar.
- En este modelo, el extremo del hilo no sobresale de la piel una vez retirada la aguja, por lo que no dispone de sistema de tracción manual (pulling).
- Se presentan en cajas de 24 unidades. (6 packs x 4u)



Referencia	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo (USP)	Recomendaciones
R-Cog Bw 23G50	23G	50mm	70mm	3-0	Facial.
R-Cog Bw 23G70	23G	70mm	90mm	3-0	Facial y corporal.
R-Cog Bw 23G90	23G	90mm	150mm	3-0	Facial y corporal.



H-COG Pulling system




- Un hilo **más grueso** que los anteriores, que proporciona un **mayor efecto tensor y prolonga los resultados**.


Con doble línea de espículas. (BW)

- Adecuado para pieles más gruesas y con una mayor necesidad de sujección. Aporta **mayor duración** a los resultados. También aplicable en **terapias corporales**.
- Las espículas bi-direccionales sujetan el tejido impidiendo que se mueva y **aumentando el efecto lifting**.
- **Doble línea de espícula** para una mayor tracción.
- La **punta** de la aguja es **roma**, tipo cánula, lo que disminuye el trauma, disminuyendo casi por completo la posibilidad de hematoma. El tiempo de recuperación para el paciente es mucho menor.
- Se presentan en cajas de 24 unidades. (6 packs x 4u)

Referencia	Tipo de Espícula	Tipo de Aguja	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo (USP)	Recomendaciones
H-Cog Bw 19G100	2 líneas bidireccionales	Blunt-L canula	19G	100mm	150mm	1-0	Facial y corporal.
H-Cog Bw 20G100	2 líneas bidireccionales	Punta roma	20G	100mm	150mm	2-0	Facial y corporal.
H-Cog Bw 23G50	2 líneas bidireccionales	Blunt-L canula	23G	50mm	110mm	3-0	Facial
H-Cog Bw 21G60	2 líneas bidireccionales	Blunt-L canula	21G	60mm	125mm	2-0	Facial

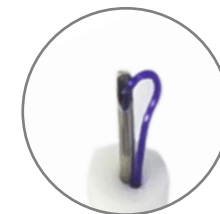

Blunt-L Cánula

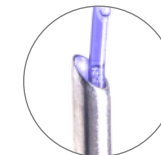

Punta Roma



3D COG



- Una sola línea de **espículas bi-direccionales** que rodean el hilo aumentando la fijación de las espículas al tejido.
- Adecuado para **reforzar los tratamientos** que requieren de la máxima tensión. Debe usarse como apoyo de los hilos de doble línea de espículas, ya que su efecto reforzará y fijará la fuerte tensión provocada por aquellos. No recomendado en pieles muy finas.
- Su grosor (1-0) proporciona la mayor duración y por tanto prolonga los resultados. La **punta** de la aguja es **roma**, tipo cánula, lo que disminuye el trauma y previene la aparición de hematomas.
- Se presentan en cajas de 24 unidades. (6 packs x 4u)

Referencia	Tipo de Espicula	Tipo de Aguja	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo (USP)	Recomendaciones
3D-Cog 19G100	bidireccional	Blunt-L Canula	19G	100mm	150mm	1-0	Facial y corporal.





PULL HEART



- Nuevos hilos Pull Heart, con **espículas más fuertes**, para un efecto lifting más **eficaz y duradero**.
- Las nuevas espículas de los hilos Dermica PULL HEART **ensanchan y refuerzan el hilo**, consiguiendo un mayor poder de tracción que permanece durante más tiempo.

- ▣ **Resultados naturales**
- ▣ Más **eficaces y duraderos**
- ▣ Aplicación **sencilla y rápida**
- ▣ Más **seguros**



Para un Lifting
más eficaz y duradero



ESPÍCULAS MÁS FUERTES

- Las espículas HEART no seccionan el hilo, sino que lo **REFUERZAN**, dándole un **mayor grosor**, con un diseño en forma de corazón o punta de flecha.
- Este diseño proporciona unas **espículas MÁS FUERTES Y SÓLIDAS** y por tanto más capaces de sujetar el tejido en la tracción.
- El grosor reforzado de las espículas las hace **más duraderas**, su período de reabsorción es sensiblemente más largo al de los hilos espiculados normales.



ESPÍCULA NORMAL



ESPÍCULA HEART

EFEECTO MÁS DURADERO

- El diseño más fuerte de las espículas HEART permite un **mayor efecto de tracción** frente a los hilos espiculados normales.
- **Más espículas, más anchas y fuertes**, que facilitan uno resultados óptimos.
- La técnica de aplicación es similar a la utilizada en los hilos espiculados normales.
- El paciente se puede reincorporar a su vida cotidiana de forma casi inmediata, con un aspecto rejuvenecido y sin apenas señales visibles del procedimiento.




MENOS HILOS PARA UN MEJOR RESULTADO.

PROCEDIMIENTO MÁS SEGURO

- Los hilos Pull Heart se presentan en **agujas de punta roma 19G100**, haciendo innecesaria su manipulación directa durante la aplicación.
- **No es necesario tocar el hilo** durante el procedimiento, lo que asegura una mayor asepsia, garantizando una **mayor seguridad para médico y paciente.**

PRESENTACIÓN

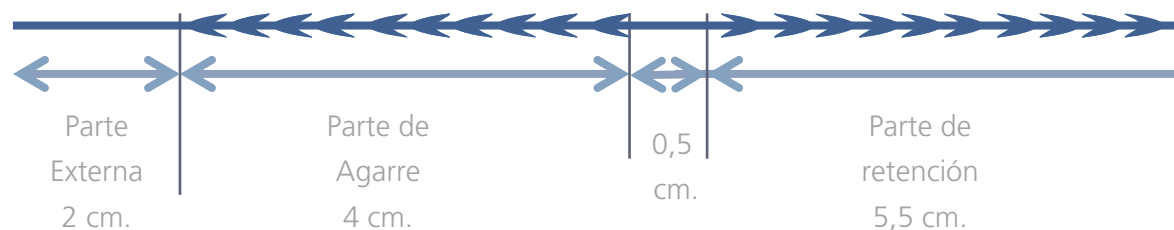

- Los hilos Pull Heart se presentan en agujas 19G de punta roma.
- **Packs de 10 hilos** 19G100 – 170. (5 sobres x 2 u.)
- Grosor del hilo en las espículas 1-0
- Grosor del hilo liso 3-0

Referencia	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo (USP), sin espícula	Grosor del hilo en la espícula	Recomendaciones
Pull Heart 19G100	19G	100mm	170mm	3-0	1-0	Facial y corporal.



www.dermica.ch

PULL COG - Bi-way



- Hilo con espículas **bi-direccionales y sistema "pulling"** para un mayor efecto tensor. Con dos líneas (BW) de espículas.
- Una aguja 23G con **pulido especial** tanto en la punta como a lo largo, para una mejor penetración. Carga un hilo de 3-0 que permite trabajar en pieles delgadas.
- El grosor del hilo (3-0) permite plegar sobre la aguja, consiguiendo una **mayor cantidad de hilo insertado** y por tanto un **mayor poder de regeneración**. La parte del hilo que sale de la aguja no lleva espículas, lo que permite el facil deslizamiento de la aguja hasta el punto deseado.
- El sentido Bi-direccional de las espículas posibilita una **mayor fijación** al tejido circundante, impidiendo que se desplace una vez insertado y facilitando un mayor efecto tensor. Mientras unas espículas "elevan" el tejido, las otras lo sujetan y mantienen. Este sistema pulling permite una tracción manual del hilo y por tanto un **mayor efecto lifting**.
- Se presentan en cajas de 24 unidades. (6 packs x 4u)



Referencia	Tipo de Espicula	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo(USP)	Recomendaciones
H-Cog Bw 23G90	2 líneas bidireccionales	23G	90mm	150mm	3-0	Facial y corporal.

